

## Filo per ganci

Wire Lab viene realizzato con acciaio Nickel Cromo e trafilato al diamante; si distingue per l'inalterabilità nel cavo orale, l'elevata elasticità e la resistenza. Wire Lab possiede tutti i requisiti qualitativi richiesti in ortodonzia e in protesi, offrendo all'operatore risultati di elevata qualità.



### Filo per ganci

mm	inch	m	
0,5	.020	50	STSH00-05
0,6	.024	40	STSH00-06
0,7	.028	30	STSH00-07
0,8	.032	20	STSH00-08
0,9	.036	10	STSH00-09
1,0	.040	10	STSH00-10
1,1	.044	10	STSH00-11
1,2	.048	10	STSH00-12

Filo duro elastico 1800/2000 N/mm<sup>2</sup>

### Filo per ganci da 500gr.

mm	inch	gr.	
0,5	.020	500	STSH50-05
0,6	.024	500	STSH50-06
0,7	.028	500	STSH50-07
0,8	.032	500	STSH50-08
0,9	.036	500	STSH50-09
1,0	.040	500	STSH50-10
1,1	.044	500	STSH50-11
1,2	.048	500	STSH50-12


Filo duro elastico 1800/2000 N/mm<sup>2</sup>

## Quad-Helix


Quad-Helix, ad inserzione verticale per favorire la facile inserzione e rimozione, è dotato di un'alta flessibilità e controllo durante il trattamento. Confezionati singolarmente, curvi e dritti, in varie misure.

### Quad-Helix

Curvo	1	QDHXC1
Curvo	2	QDHXC2
Curvo	3	QDHXC3
Dritto	1	QDHXS1
Dritto	2	QDHXS2
Dritto	3	QDHXS3

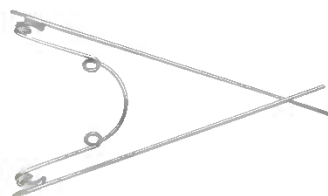


Quad-Helix curvo

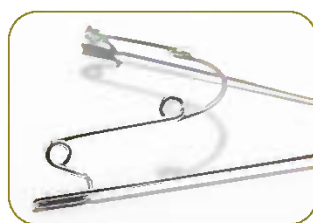

Quad-Helix dritto

## Ganci a palla

Ganci a Palla sono eccellenti accessori per applicazioni removibili, prodotti in acciaio inossidabile; confezioni da 100 pezzi.

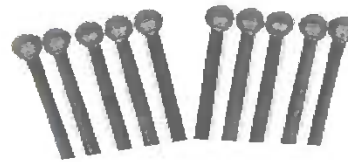

mm	inch	
0,6	.024	SSBC024
0,7	.028	SSBC028
0,8	.032	SSBC032
0,9	.036	SSBC036
1,0	.040	SSBC040

Confezione da 100 pz.

## Saldatura in argento

Saldatura in argento ed un prodotto specifico per le saldature in campo odontoiatrico; spoletta da 79 mm con diametro 0.31".



SLVSLD  
Spoletta

## Resina ortodontica autopolimerizzante

Resina a freddo studiata per uso ortodontico particolarmente indicata per la costruzione di apparecchietti, la particolare composizione del liquido permette di lavorare a lungo senza che nel frattempo inizi il processo di polimerizzazione. Si consiglia l'uso di idromufola o pentola a pressione 2-2,5 bars. Metil Metacrilato copolimero autopolimerizzante a freddo. Esente da cadmio. ISO 1567. Tipo I.

A richiesta sono disponibili confezionamenti di  
 Polvere da 5 kg e 50 kg.  
 Liquido da 5 lt. e 190 lt.

Resina	1 kg	02-016L
Liquido	500 ml	02-016P

